

取扱説明書

保証書付

保管用

製造番号

Lourdes STYLE



EMS MASK

ルルドスタイル EMSマスク

品番 AX-FRL912



このたびはAX-FRL912をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ATEX

目次

⚠ 安全上のご注意	2 ~ 6
🔍 梱包内容と各部の名称	7
👤 使いかた	8 ~ 12
🧻 お手入れ・保管について	12
⚙ 故障かなと思ったら	13 ~ 14
🔧 仕様	15
♡ 保証とアフターサービス	16 ~ 18

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す
記号



強制を促す
記号

警告



本製品は充電式電池を内蔵しています。
火中投入、加熱、高温・低温下での充電、使用、
放置をしないでください。
発熱、発火、破裂の原因になります。

症状について



- 次の人は使用しないでください。
- ・ 金属アレルギーを含むアレルギー体質の人
 - ・ 体内埋（植え）込み型および装着型の医用電子機器を使用している人
 - ・ ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
 - ・ 人工心肺など生命維持用医用電子機器
 - ・ 心電計などの装着型医用電子機器
 - ・ 接触性皮膚炎など、皮膚に既往症のある人

- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・緑内障、白内障の人、及び眼球・目の周りに炎症を起こしている人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
- ・過度の日焼けで肌が炎症を起こしている人
- ・皮膚トラブルのある人
- ・肌に重度のシミや創傷のある人
- ・毛細血管拡張を起こしている人
- ・自分で意思表示できない人や身体の不自由な人
- ・幼児やお子様

 指定の部位以外や次の部位には使用しないでください。

- ・胸部及び心臓の近く
- ・粘膜、肘、膝などの関節
- ・手術後の傷跡の上・傷口、にきびや吹出物で炎症を起こしている部位
- ・皮膚炎症を起こしている部位
- ・整形手術をした部分

- ・金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部分
- ・刺青(タトゥー)を入れている部分

 次の人は必ず医師とご相談の上、ご使用ください。

- ・血圧に異常のある人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠初期の不安定期から出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・アトピー性皮膚炎の人
- ・敏感肌や肌の弱い人
- ・血行障害のある人
- ・脳神経に異常を感じている人(てんかんなど)
- ・その他、医療機関で治療中の人

ご使用について

 幼児やお子様に通電中に触れさせたり、使用させたりしないでください。

思わぬ事故の原因になります。

通電部に金属や物を当てないでください。

ショート、発熱、故障の原因になります。

エクササイズ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

他の美容器や運動器と同時に使用しないでください。

健康を害する恐れがあります。

本体を水につけたり水洗いしないでください。

感電・ショート・発火などの原因になります。

 使用前に商品に破損がないかを確認してください。

通電部・マスク生地が破れている場合は使用しないでください。

 使用より身体や肌に異常を感じた人は、使用を中止し、医師に相談してください。

健康を害したり症状の悪化につながる恐れがあります。

肌に強い痛みや赤みを感じたら、すぐに使用を中止してください。

やけどやケガのおそれがあります。

電源について

 USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

収納時にUSBケーブルを本体に巻き付けしないでください。

コードに負荷がかかり断線し、ショート火災などの原因になります。

USB端子に金属やゴミを付着させないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

安全上のご注意

 お手入れの際は、必ずUSBケーブルを本体や電源から抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。

 USBケーブルを抜くときは、コードを持たずに端子部分を持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。

異常（故障）について

 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

その他

 本体に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。

 改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は弊社カスタマーサービス課に連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。

注意

ご使用について

 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。（本品は防水仕様ではありません）
感電や故障の原因になります。

本体に重量物を置いたり落下させたりしないでください。
故障や事故の原因になります。

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。
十分に呼吸が出来ず、窒息の原因になります。

食後30分以内のご使用はしないでください。
体調不良の原因となります。

高温のものや火気の近くでは使用・保管しないでください。
変形や故障の原因、発火の恐れがあります。



人体以外には使わないでください。

事故や故障の原因になります。

本商品を強く曲げたり、切ったり、折ったり、重なった状態で使用しないでください。

事故や故障の原因になります。

感染防止用マスクとして使用しないでください。

本マスクは、感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。飛沫防止等を目的にご使用していただけます。

マスク・本体の端子には強力な磁石が内蔵されています。電化製品やクレジットカード、時計などの近くで使用しないでください。

データや機器が壊れるおそれがあります。



使い初めは、強度レベル1からお使いいただき、お好みで徐々に強さを調節してください。

初めから刺激を強くすると健康を害する恐れがあります。

1回の使用は5分以内にしてください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。



1日の使用時間は合計で10分以内にしてください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

アクセサリなどが当たらないように外して使用してください。

事故や故障の原因になります。

長期間ご使用にならない場合でも、3ヶ月に1度の目安で充電してください。

長期間ご使用にならないと機能が低下し、本体内の充電池の故障の原因になります。

ご使用の際は通電部全面が肌に触れるようにしてください。

皮膚との接触面積が小さくなると刺激が強くなります。


🔍 梱包内容と各部の名称

梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください

- マスク部
- 本体
- USBケーブル
- 収納ポーチ

付属品

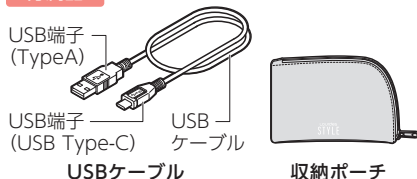


各部の名称


マスク部

マスク外側


接続端子

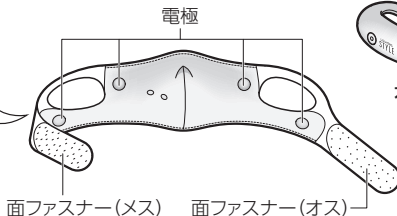

マスク内側

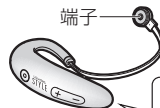

本体

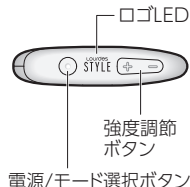

使いかた

初めてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が放電し、作動しないことがあります。充電してからお使いください。

ご使用前の準備 (充電する)


1 USBケーブルで本体と電源をつなぐ

USBケーブルの端子を電源のUSBポートと本体の充電口につなぎます。

●主な電源



市販の
ACアダプター

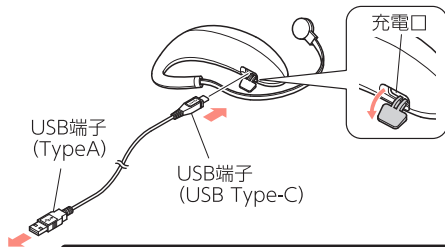

注意

- それぞれをつなぐ際は、真っ直ぐ根元まで確実に差し込んでください。


※定格出力が電圧5Vで、電流は500mA以上のものを使用してください。

※使用する電源機器の取扱説明書をよく読み注意に従ってください。

※USB電源出力が十分でない場合は充電ができない場合があります。その場合は他の機器をお試しください。

2 充電開始

本体のロゴLEDが点灯し、充電を開始します。

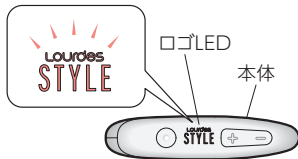

3 充電完了を確認


ロゴLEDが消灯したら充電完了です。

- 電池残量がない状態から、フル充電まで約2.5時間かかります。
 - 初めてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。
- ※極端な低・高温時は充電できないことがあります。
- ※充電中は使用できません。

ご使用前の準備

1 マスクを装着する

1. 電極部を内側にして耳にマスクを掛けます。
2. 電極部がしっかり肌に密着するように、首の後ろの面ファスナーで、固定してください。

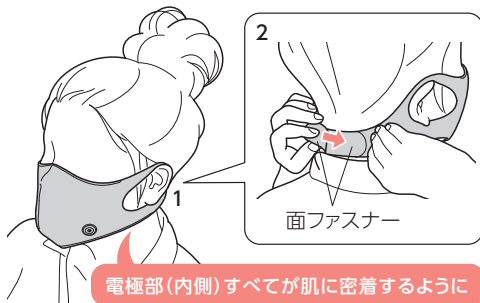

注意

- 水をかけないでください。
- マスクを装着する前に電源を入れないでください。


2 本体をつける

1. 本体を左側の耳に引っ掛けるように装着します。
2. マスク表面の接続端子に本体の端子を接続します。




⚠ 注意

- 接続端子は、しっかりと取り付けてください。

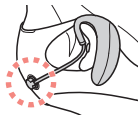

- マスクには、マグネットを使用しています。

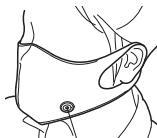


接続端子
(マスク外側)

エクササイズを開始する

1 電源/モード選択ボタン⊙を長押しして電源を入れる

ロゴLEDが青色に点灯し、EMSの強度1でスタートします。

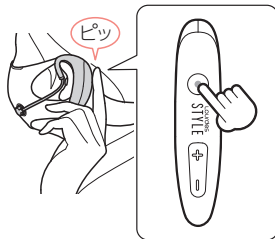

⚠ 注意

- 接続端子には、ニッケルメッキを使用しています。
金属アレルギーの方はご使用をお控えください。

2 電源/モード選択ボタン○を押してモードを選ぶ

電源/モード選択ボタンを押して、どちらかお好みのモードを選びます。

○ボタンを押すと、ピピッと音が鳴ります。

●エクササイズモード

(3秒ON、1秒OFF)

●タッピングモード

(1.5秒ON、1秒OFF)



○ボタンを押すたびにモードが切り替わります

3 EMS強度を調節する

刺激が弱い、強いと感じたら強度調節ボタン(+・-)を押して調節します。

6段階で調節が可能です。

※強度は、1以下または6以上にはできません。設定しようするとピピピと警告音が鳴ります。



⚠ 注意

- 使い初めはEMSの強度は「1」でご使用ください。慣れてきたら、お好みで徐々に強さを調節してください。
- 使用中にランプが赤色の点滅を始めたら、充電池の残量が少なくなっています。充電をしてください。
- 肌に強い痛いや赤みを感じたら、すぐに使用を中止してください。やけどやケガのおそれがあります。

4 終了する

最初に電源／モード選択ボタンを押してから約5分で自動停止します。

任意の時間で停止したいときは、電源／モード選択ボタンを長押し、停止してください。



お手入れ・保管について



警告 ●必ず電源が「切」の状態で行ってください。

- マスク部や本体のお手入れの際はUSBケーブル・接続端子は必ず外してください。
- 使用後汚れが気になる場合は、マスク本体を手洗いしてください。
 - ・マスクをまっすぐの状態にして優しく押し洗いしてください。マスクを歪めたり揉んだりしないでください。
 - ・水を上から流して洗ってください。マスクは浸水させないでください。
 - ・洗濯機では洗わないでください。
 - ・洗剤は使わず水道水で洗ってください。
- 洗った後は完全に乾燥してから使用してください。
- 本体は、手洗いをせず、湿らせた布やティッシュで拭きとってください。
- 3ヶ月に一度は充電してください。

※肌に通電しないまま約60秒経過すると自動停止します。



注意

- マスクを外す際は、必ず電源を切ってから行ってください。

- 幼児やお子様の手が届くところには保管しないでください。
- 直射日光の当たる場所、高温多湿、水気の近くは避けて保管してください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。
- 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の、指示にしたがってください。
- 洗濯によりマスク本体の傷みが生じます。洗濯の都度、状態をご確認いただきご使用に支障がある場合はマスク本体の別売品をお求めください。(P.15参照)



注意

- 水分が残った状態で使用すると、けがや故障、事故の原因になります。
- 廃棄の際、充電残量がある場合は、電源が入らなくなるまで何回か使用して電池を使い切ってください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

電源が入らない	電源/モード選択ボタンを長押ししていますか？ →1秒以上長押ししてください。
	充電が不十分、または充電が切れていませんか？ →正しく充電してください。(P.8)
電源が切れる	充電が不十分、または充電が切れていませんか？ →正しく充電してください。(P.8)
	使用開始後約5分経つと自動的に電源が切れます。 →故障ではありません。
使用中、赤色のランプが点滅する	充電が不足しています。 →正しく充電してください。(P.8)
充電できない	長期間保管し、電池が放電しきっていませんか？ →完全放電すると充電できませんので、3ヶ月に1度は充電してください。

EMSが弱い (感じない)	EMS強度が弱くありませんか？ →強度調節ボタン (+) を押して調整してください。
	肌が乾燥していませんか？ →油分の入っていない水溶性ジェルで肌を湿らせご使用ください。
EMSが強い (痛い)	EMS強度が強くありませんか？ →強度調節ボタン (-) を押して調整してください。
	すべての電極が肌に触れていますか？ →部分的に触れると刺激が強くなります。全面が触れるようにしてください。
途中で止まる	肌に通電しないまま約60秒経過すると自動停止します。 →油分の入っていない水溶性ジェルで肌を湿らせご使用ください。すべての電極に素肌が触れるようにしてください。
使用後に肌が 赤くなったり かゆくなったり する	長時間使用していませんか？ →肌や身体の状態を見ながら使用してください。赤みやかゆみがおさまるまで使用しないでください。
	EMS強度レベルが強くありませんか？ →使用を中止し赤みやかゆみがおさまってから弱から再使用してください。

仕様

販売名	ルルドスタイル EMSマスク	充電時間	約3時間
商品番号	AX-FRL912	使用時間	1日10分(5分/回)
製品 サイズ	本体：(約) W45×L75×H16 (mm) マスク部(折り畳み)： Mサイズ(約) W255×L130×H10 (mm) Lサイズ(約) W285×L140×H10 (mm) USBケーブル長：約1m	連続使用時間	2時間
製品重量	約50g	素材	本体：ABS樹脂 マスク部：ポリエステル95%、 ポリウレタン5%、 Nd-Fe-B 焼結マグネット、 ニッケルメッキ(マグネット部)、 クロムメッキ(通電部)
タイマー	5分自動オフ	出力周波数	(約) 30Hz
電源電圧	DC3.7V(リチウムイオン電池)	生産国	中国
内蔵電池	120mAh		

大きめLサイズ・替え用マスクも販売中

ルルドスタイル EMSマスク Lサイズ 品番：AX-FRL912L
 ルルドスタイル EMSマスク 替え用 品番：AX-FZL913

お問い合わせ・お買い求めは **アテックス** **ダイレクト**まで

<https://www.atex-net.co.jp/>  **0120-486-505**

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、次ページに添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
 - 2 保証期間は、お買上げ日より6ヶ月です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
 - 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
 - 4 弊社は「ルルドスタイル EMSマスク」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
 - 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。
- ※保証は、本体のみとなります。洗濯による劣化は保証対象外となります。



株式会社 アテックス
ATEX <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00～17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、
保証書に記載された期間、下記保証規約により
無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書
を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 型番	ルルドスタイル EMSマスク / AX-FRL912		
お買上げ年月日★	年 月 日	保証期間	お買上日より6ヶ月 本体
★ お客様	お名前		★ 販売店
	ご住所		
	TEL : () —		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
 - ・洗濯によるマスク生地の変色
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から6ヶ月です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

Lourdes STYLE